

## スムーズスキン BARE+へようこそ。

#### このたびは「スムーズスキンbare+」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

スムーズスキン bare+は、英国CyDen社で開発された光エネルギーによる光脱毛美容器です。 本製品を正しく安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みになって、ご使用ください。 また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

#### 目次

$\square$			
1.0	安全上のご注意	4	4.3 お手入れ 19
1.1	ご使用前に	6	4.4 お手入れの方法―
1.2	ご使用場所・電源について		1回または連続照射 20
1.3	準備		4.5 スイッチの切り方 20
1.4	ご使用中	11	5.0 アフターケア 2.3
1.5	ご使用後	11	5.1 皮膚トラブルについて 2.
1.6	保管とメンテナンス	12	5.2 その他の皮膚トラブルについて 2.2
2.0	各部名称	14	5.3 メンテナンスおよび保管 2.3
3.0	製品紹介	15	5.4 故障かなと思ったら 24
4.0	ご使用方法	17	6.0 仕様・保証など 2.5
4.1	皮膚テスト	17	6.1 仕様 2.5
4.2	ご使用方法		6.2 廃棄(寿命)
	①使用部位の準備	17	6.3 保証とアフターサービス 20
	②製品を使用	17	保証書 2
	使用上の注意	18	

## 1.0 安全上のご注意

#### 正しく安全にお使いいただくために

ご使用前に、この「安全上のご注意」 (4ページ〜13ページ)を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなた自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。誤った取扱をすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずお読みになって良く理解し、指示に従ってください。

※取扱説明書は本製品を正しく安全にお使いいただくために必要です。本製品を人に貸したり、差し上げるときには必ず この取扱説明書をご一緒にお渡しください。

#### ●表示と意味については次のとおりです。

表示	意味
⚠危険	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠ 警告	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。
<u>⚠</u> 注 意	取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 *物的損害とは、家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

#### ● 絵表示の例





は、「<mark>危険・警告・注意」</mark>を示します。具体的な注意内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 **、**※表示例は「感電注意」です。





は、「禁止行為」(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。※表示例は「分解禁止」です。





は、「<mark>行為の強制・指示」(必ずやること)</mark>を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。※**表示例は「コンセントからプラグを抜く」です**。

本書に記載されている内容に関し、ご不明点、ご質問などは、お買い上げ先またはカスタマーサポートまでご遠慮なくお問い合わせください。

http://www.smoothskin.com

## 1.1 ご使用前に

## A 危険



- 次のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。
- \*ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- \* 人工心肺などの生命維持用医療電子機器
- \* 心電計などの装着型医療用電子機器
- \* その他体内に装着している医療用電子機器
- ※ 守らないと医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。

## ▲危険

#### ● お手入れする部位の肌色・毛色が適さない方

- ・生来の毛色が明るい金色、白色、灰色、赤色の方 ・肌色が以下の肌色チャートの"6"の方は照射できません。
- ・肌の色がとても濃い方は、スムーズスキンbare+のご使用をお控えください。(肌色チャートでご確認ください)とても色が濃い肌は光エネルギーを吸収しすぎ、肌に損傷(火傷、変色、傷跡など)を引き起こすことがあります。

| 肌色チャート | 1 2 3 4 5 6 TX-ジ図

## ▲ 警告

- 次のような方は、使用を避けてください。 ※ 事故や体調を悪化させるおそれがあります。
- | \* 心臓疾患の人 \* 悪性腫瘍のある人及び過去に皮膚の悪性腫瘍を患った人 \* 妊娠中や出産直後の人 \* 生理中の時
- \* 血圧異常の人 \* 急性(疼痛性)疾患の人 \* 化学繊維などでかぶれた経験のある人 \* 糖尿病の人 \* てんかんの人 \* アトピー性皮膚炎の人 \* ヘルペスなど感染症疾患の人 \* アレルギー体質の人 \* 有熱性疾患の人 \* 結核性疾患の人
- \* アトヒー性皮膚炎の人 \* ヘルベスなと感染症疾患の人 \* アレルキー体員の人 \* 有熱性疾患の人 \* 結核性疾患の人
- \* 特に肌が敏感の人 \* 顔面神経痛の人 \* ケロイド体質の人 \* 血友病疾患の人 \* 狭心症のある人 \* 多発性硬化症の人 \* 精神機能、生理機能、内臓機能の弱い人 \* 紫斑病など内出血しやすい人 \* ステロイドなどの薬物で毛細血管拡張を起こし
- \*精神機能、生理機能、内臓機能の弱い人 \* 紫斑病など内出血しやすい人 \* ステロイドなどの薬物で毛細血管拡張を起こしている人 \* 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人 \* 目の病気のある人(白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血など) \* 成長過程の子供 \* 自分の葦まで動じてと葦里表示のできない人 \* 以前脱半商原よを使用後、5~6時間たっても肌が充血した



\* 成長過程の子供 \* 自分の意志で動くこと意思表示のできない人 \* 以前脱毛商品を使用後、5~6時間たっても肌が充血したままで赤みが消えなかった人 \* ポリフィリン症や日光及び光線などに過敏な人 \* 過去6ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた人 \* 全身性疾患や代謝性疾患で皮膚の状態が正常でない人 \* HIV(ヒト免疫不全・フィルス)感染者、または、AIDS(後天性免疫不全症候群)既往の人 \* 抗凝血剤を使用している人やアスピリンを多用する人 \* 免疫抑制剤を使用している人 \* その他医師の治療を受けている時や療養中、身体に異常のある人は医師にご相談ください。

#### ● 次のような部位及びその周辺部には使用しないでください。

\* 頭部、額、まぶた、耳、鼻、口中、首、心臓、乳頭、乳輪、肛門、陰部、生殖器、粘膜部及びデリケートな部位及びその周辺の毛(まつ毛、鼻毛など) \* 男性のヒゲ \* 皮膚に傷、火傷、イボ、ニキビ、湿疹、吹出物やかゆみやほてりなど炎症や化膿などトラブルを起こしている部位 \* 褐色から黒色、緑や青がかったホクロやアザなど \* 色素沈着している部位(シミ、ソバカス、ホクロ、斑点など)やメラニンの濃い部位及び毛(ホクロ、乳輪の毛など) \* 色素性病変の部位(アザなど) \* 日焼けしている部位(特に2週間以内に強い日光や人工的に日焼けした部位) \* 整形手術やイレズミした部位 \* 体内に金属、プラスチック、シリコンを埋め込んでいる部位 \* 麼覚、知覚障害のある部位 \* 薬品を塗布している部位 \* コラーゲンを注入している部位 \* レーザー、各種のピーリングを行い、回復期間がすぎていない部位 \* 皮膚の弱い部位や乾燥している部位

※ 事故や身体・肌のトラブルのおそれがあります。

## 1.2 ご使用場所・電源について

- 浴室内や湿気の多いところ、トイレ内などで水のかかりやすいところでの使用はしないでください。
- ※ 事故や感雷、故障のおそれがあります。



- 台所やストーブなど、火気や熱気、湯気の近く、車の中、直射日光のあたるところでの使用はしないでください。
- ※ 事故や感雷、故障のおそれがあります。
- ACアダプターのコードやプラグにホコリやゴミを付着させたまま使用しないでください。
- ※ 火災、感雷、ショート、火傷のおそれがあります。



- 必ず正しく配線された交流100V 50/60Hzの家庭用電源を使用してください。
- ※ 守らないと火災や感電、火傷のおそれがあります。



- 必ず専用のACアダプター使用してください。
- ●付属の電源コードは、本製品専用となります。他製品では使用できません。
- ※ 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。



- 使用を中断する時や使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。 ACアダプターを抜く時は、コードを引っ張らず、差し込みプラグをもって引き抜いてください。
- ※ 守らないと火災や異常出力により火傷、感電のおそれがあります。

## 1.3 準備

## ▲ 警告



- ご使用前に必ずムダ毛を剃ってください。 ※ 火傷の原因となります。
- 必ず本品の使用目的にしたがって使用してください。 ※ **守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります**。
- 取扱説明書で定められた操作手順で操作してください。 ※ **守らないと事故や体調不良や故障をおこすおそれがあります**。
- 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示に従ってください。(11ページ参照)
- ※ 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 次のような体調の時は使用しないでください。
  - \* 生理中の時 \* 飲酒や薬を服用中の時 \* 疲労が激しい時
- \* 日焼け直後で肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている時 ※ 事故や体調不良をおこすおそれがあります。



- 他の機器との併用はしないでください。 ※ **事故や体調不良をおこすおそれがあります**。
- 本製品は家庭用機器ですので、業務用の目的では使用しないでください。 ※ 事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 禁止
- 他人との共用はしないでください。
- 次のような時は使用しないでください。\* 本体、コード、ACアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。\* オンセントへの差込みがゆるい。※ 火災、廃電、ショート、火傷のおそれがあります。



● ぬれた手で使用しないでください。 ※ **感電やショート、事故のおそれがあります。** 

## ▲ 注意

- 本製品の取扱いは次の事項を守ってください。
  - ・初めてご使用される時は、腕の内側のような敏感で目立たない部位に照射(皮膚への照射テスト/以下皮膚テスト)し、24時間後の皮膚に異常がないことを確認してください。(17ページ)万一、異常が生じた時は、使用を中止し、11ページの「ご使用中」の事項の指示に従ってください。尚、一時的に多少の赤みが出る場合もあります。その時は、その赤みが消え、異常がないことを確認してからご使用ください。
  - ・本製品のスイッチが入っている時には、直接製品の発光口を見てはいけません。
  - ・本製品を目に向けて照射しようとしてはいけません。
  - ・目の周囲(眉毛またはまつ毛)にはご使用にならないでください。
  - ・照射される光線を見ないでください。
  - ・照射する時は皮膚に完全に密着させてください。
  - (光線は自分や他人の目に向けて絶対に照射しないでください。)
  - ・身につけている貴金属などは全てはずしてください。
- ※ 上記を必ずお守りください。事故や身体・肌のトラブルのおそれがあります。
- ※ 光の刺激によって増毛する場合もございます。
- 本製品は通電したままの放置はしないでください。 ※ 事故やトラブルの可能性があります。
- ●使用前にスイッチなどを操作し、正常に作動するか確認してください。 万一、損傷や異常などがある場合は、ご購入先かカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ 守らないと、事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- ●全てのコードは簡単に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
- ※ 守らないと、発火やショート、体調不良をおこすおそれがあります。



## 1.4 ご使用中

## ▲ 警告



本製品を使用し、痛感や不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ、色素沈着、水ぶくれ、炎症等の皮膚症状があらわれた時、その他に異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、すぐに冷たいタオルなどで冷やし、カスタマーサポートにお問い合わせいただくか、専門医にご相談ください。

- ※ 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 同一箇所に1日に2回以上は使用しないでください。
- ●同一箇所に1週間に1回以上は使用しないでください。●使用前や使用中、使用部位にジェルやローションを塗布しないでください。
- ※ 守らないと、事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 使用中に異臭や発熱した時は使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ※ 事故や故障をおこすおそれがあります。
- \* 点検のためご購入先かカスタマーサポートまでご相談ください。

## 1.5 ご使用後

## ▲ 注意



- ご使用後24時間は、使用部位が紫外線に当たらないようにご注意ください。また、ご使用後2週間は、SPF30 以上の日焼け止めを塗り、使用部位を保護してください。
- ●本体、付属品などは、電源を切り、コード類を元の位置に戻し、今後の使用に支障のないよう、整理し、保管してください。コード類は無理に曲げたり、丸めたりしないでください。
- ※ 守らないと接触不良や故障、火災をおこすおそれがあります。

## 1.6 保管とメンテナンス

## ▲ 警告



● お子様や自分で意思表示できない人の手の届かないところに保管してください。 ※ 守らないと事故や体調不良、故障などをおこすおそれがあります。

- お手入れは、電源を切り(パワーOFF)ACアダプターを本体から抜いて行ってください。
- ※ 守らないと感電などの事故をおこすおそれがあります。



● 本体や付属品を改造、分解、修理はしないでください。

- ※ 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
- \* 修理はお買い上げ先、または当社までご相談ください。

## ▲ 注意



#### 必ず守る

- ●保管場所は、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)、高温多湿、振動、直射日光の当たるところをさけ、 安全なところに保管してください。
- ※ 守らないと事故や故障の恐れや劣化を早めたりします。
- ◆本体や付属品の清浄は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯を使用しないでください。着脱式照射口の汚れがひどいときは、水に布を浸しよく絞ってから、汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。※変色や傷がつくおそれがあります。
- ■本体や付属品に水や他の液体をかけたり、浸したり、水中に入れないでください。
- ※ 火災や感電、ショート、火傷、故障のおそれがあります。



- 本体や付属品を熱器具に近づけたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ※ 発熱、発火、故障等の原因になります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 また、重いものを乗せたり、はさみこんだりしないでください。
- ※ 火災や感電、ショート、火傷のおそれがあります。
- 本体や付属品を高いところから落としたり、破損したら使用をしないでください。
- ※ ケガや故障のおそれがあります。
- 電源ジャックなどの差込口に金属製の棒やピンなどを差し込まないでください。
- ※ 守らないと、発火、感電などの事故をおこすおそれがあります。

# 2.0 各部名称



## 3.0 製品紹介

#### シルクのような滑らかなお肌を保つために

シルクのような滑らかなお肌を保つための秘密は正しい使用方法でお手入れすることです。 正しくお使いいただくことで、ムダ毛の再生サイクルを断ち、時間がたつにつれて、お手入れがしやすくなります。

#### 最速照射

1分間に100回の照射で約10分で全身(脚、ビキニライン、ワキ)のお手入れが完了できます。

#### 安心&シンプルケア

スムーズスキンbare+は照射前に肌の色を感知し、使用できる場合のみ照射します。

#### 4週間のお手入れで変化が見られます\* \*CyDen調べ

週に1度のお手入れをするだけで4週間後には変化がみられます。

#### 1台で全身ケアが完了するまでご使用いただけます

全身ケアが完了するまでの目安は数か月から1年程度です。 スムーズスキンbare+は全身ケア完了までお使いいただけます。

#### 光エネルギー(IPL)脱毛とは?

光エネルギー(IPL)をお肌に照射し、ムダ毛の再生サイクルをケアするようにデザインされています。 照射された毛は数日間から1~2週間で抜けていきます。 ※モの太さや成長状況により抜けるまでの日数が異なります。

#### どんな効果を期待できますか?

スムーズスキンbare+を正しい使用方法でお手入れしていただくと、シェービングのチクチクした肌を経験することはなくなり、滑らかな肌を長時間保つことができます。

#### スムーズスキンbare+はどんな肌に使用できますか?

スムーズスキンbare+は肌の色がとても濃い方、毛の色がとても薄い方以外の肌に使用できます。

## 4.0 ご使用方法

#### 4.1 皮膚テスト

本格的なご使用の前に、皮膚テストをお勧めします。

皮膚テストは、3cm×2cmのサイズ(2照射分の大きさ)で行います。

- 1.3.2の手順に従って、使用する部位の準備をします。
- 2. フラッシュを照射します。
- 3.24時間待って、使用部位に異常がないか観察します。
- 4. お肌に異常がなければ、本格的にご使用頂いて問題ありません。 ただし、皮膚テストをした部位は、少なくとも1週間は、使用しないでください。

#### 4.2 ご使用方法

#### ①使用部位の準備

使用部位が、ワックス脱毛など毛根から脱毛していないか確認します。

- 1. 使用する部位をカミソリや電気シェイバーで剃ります。 ※剃り残しがあると効果がなくなるだけではなく、火傷をするおそれがあります。
- 2. 脂分や汚れを石けんで洗い、きれいな水で流して乾かします。

#### ②製品を使用

- 1. 本体の電源ジャックに電源プラグを接続します。
- 2. ACアダプターに電源コードを接続し、プラグをコンセントに接続します。 ハンドセット前面のスキントーン・センサーが青く点灯し、照射の準備ができていることを示します。

#### ご使用上の注意


ハンドセットが、皮膚にしっかりと接触しているか確認してください。 皮膚に押し付けられていないと、ハンドセットは 正確な肌の色調を検出することができません。



イメージ図

#### 4.3 お手入れ

- ・お手入れをなさる部位に、ハンドセットをしっかりと当ててください。 作動ボタンの周りのインジケーターは製品の準備ができると、白く点灯します
- ・作動ボタンを押してください。装置は発光し、温かく感じます。
- ・ハンドセットを次の部位に移動し、同じ手順を繰り返してください。
- 全ての箇所にお手入れが行き渡るようにしてください。

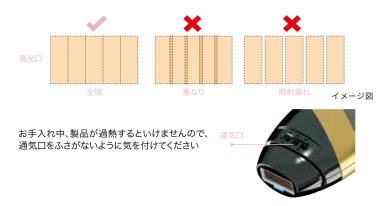

#### 4.4 お手入れの方法-1回または連続照射

お手入れ方法には、「1回照射」または「連続照射」の2つの方法があります。 どちらの方法をお使いになる場合でも、ハンドセットは照射毎に移動し、同じ部位に重ねて照射しないようにご注意ください。

#### 1回照射

この方法は、顔や脇の下など狭い部位のお手入れに適しています。 1回ごとにハンドセットを移動させて、照射する方法です。

#### 連続照射

この方法は、脚のような広い部位のお手入れに適しています。 まずはハンドセットを皮膚に当てます。次に作動ボタンを押さえ続けて、ハンドセットを照射しながら皮膚に沿って滑らせます。 ハンドセットは、照射が重なったりまたは照射されない箇所がないように、一定の速さで動かすようにしてください。

#### 4.5 スイッチの切り方

お手入れが済んだら、スムーズスキンbare+を電源コンセントから抜いてください。 スムーズスキンbare+の保管やメンテナンスに関しましては、5.3の項目をご覧ください。

## 5.0 アフターケア

#### 5.1 皮膚トラブルについて

本製品は強力な熱を発生させる為、その作用により、使用中に熱く感じたり、パチンとゴムではじかれたような痛みが感じられ皮膚が赤くなるといったことがありますが、このような反応は正常なものであり、通常24時間程度で消えます。

また、少しでもムダ毛の剃り残しがあると、IPLの発光によって加熱して、それがお肌につくと火傷の原因となりますので、 ご注意ください。

万一、それ以降もお肌に異常が現れたり、使用中に火傷などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医かカスタマーサポート http://www.smoothskin.com にご連絡ください。

## 5.2 その他の皮膚トラブルについて

皮膚の反応	対処方法
使用箇所の軽い痛み。	これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。 慣れないうちは、冷たいタオルなどで冷やしましょう。
数秒から1分以内で消える暖かさやチクっとした感じ、または、皮膚の赤み。	これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。 慣れないうちは、冷たいタオルなどで冷やしましょう。
皮膚の赤みが24-48時間経っても消えない。	直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けましょう。
使用中に非常に強い痛みなどの不快感がある。	直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を 受けましょう。
腫れや赤みが2-3日経っても消えない。	直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を受けましょう。また、カスタマーサポート http://www.smoothskin.com にご連絡ください。
明るくなったり、暗くなるなど皮膚の色が変わる。	直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を受けましょう。 また、カスタマーサポート http://www.smoothskin.com にご連絡ください。
火傷や水泡の反応があらわれる。	直ちに使用を中止し、冷たいタオルなどで冷やし、消毒薬や、火傷治療薬などを塗り、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を受けましょう。 また、カスタマーサポート http://www.smoothskin.com にご連絡ください。

#### 5.3 メンテナンスおよび保管

- 1. お手入れ後は必ず、電源コンセントから ACアダプターを抜き、本体を冷やします。
- 2. ご使用後は、ハンドセットに破損がないかを確認し、糸くずの出ない乾いた布で拭いてください。

安全上のご注意: ご使用中、ガラス・フィルターは熱くなります。ご使用後、フィルターが冷めるまで触ったり 掃除をしたりしないでください。 水や洗剤は使用しないでください。故障の原因になります。

スムーズスキンbare+の性能を最大にご利用いただくため、発光口およびスキントーン・センサーの汚れを定期的に取り除いてください。

- 3. スムーズスキンbare+は、涼しく乾いた場所に保管してください。 ハンドセットの発光口およびスキントーン・センサーが壊れないようにお気を付けください。
- 4. 目に見える損傷の跡がないか、(コードも含めて)装置を定期的に検査してください。



## 5.4 故障かなと思ったら

症状	解決方法
製品を皮膚に当てたときに、ハンドセットの作動ボタンが点灯しない。	電源が入っていることを確認してください。スキントーン・センサーを、しっかり皮膚に接触させてください。 肌の色調が濃すぎて、お手入れに適していない可能性があります。この取扱説明書の最初の方にある肌色チャートで確認してください。
ハンドセットを皮膚に当てると、作動ボタンは白く点灯しますが、 作動ボタンを押してもハンドセットは照射しない。	これは、製品が故障している可能性があります。 装置を電源から抜き、再起動してください。 問題が解決しなければ、ウェブサイトでカスタマーサポートの詳細をお求めください。
ハンドセットの作動ボタンが赤く点灯したままで、製品は作動しない。	これは、装置が故障しているということを示しています。 装置の ご使用をおやめになり、ウェブサイトでカスタマーサポートの詳細を お求めください。
ハンドセット、発光口、電源装置またはコードが損傷、故障している、 ひびが入っている、または欠陥があるように見える。	で使用にならないでください。 スムーズスキン bare+に損傷がある のではないかと思われる場合は、ご使用なさらずに、ウェブサイトでカスタマーサポートの詳細をお求めください。

#### 6.0 仕様・保証など

#### 6.1 仕様

• 品名: スムーズスキン bare+

•型番:SSB4J-BLK-BXS-ASI

SSB4J-WHT-BXS-ASI SSB4J-NUD-BXS-ASI

•本体重量:約200g

•繰り返し数:0.6秒ごとに手動パルス

•連続操作

•最高の光出力:4J/cm<sup>2</sup>

•パルス長:1m秒 半値全幅

•波長:515-1100 nm(ナノメートル)

•電源入力:100-240V,50/60Hz, 1.7~0.91A

·使用温度:5~40°C

•使用湿度:最高93%R.H. 結露なし

•使用圧力:700hPa~1060hPa

•**お手入れ範囲:**3cm²(30mm×10mm)

(スポットサイズ)

### 運送条件

·温度:-25°C~70°C

•湿度:最高93%R.H. 結露なし

•**圧力:**500hPa~1060hPa

スムーズスキン bare+は、単一ユーザー 用です。

CEマーキングは、この器具が以下の EEC指令に適合していることを認証する ものです。

•低電圧指令2014/35/EU

•電磁両立性指令2014/30/EU

・エネルギー関連製品指令2009/125/EC

★

支着部タイプBF



第二種器具



専用方法をお読みください



欧州連合(EU)の電気・電子製品の 廃棄マーク



【 € 欧州規格適合マーキンク



乾いた状態を保持してください。



NRTL (米国国家認証試験機関 認証マーキング



北米向けFCC・EMC規格準排



ーストフリア規制 L拠マーク



関税同盟対象EAC規格 マーキング



efoil社のウクライナ共和国 象規制準拠マーク



P国RoHS指令環境保護



機器からの光放射で目に損傷が 起こる場合がありますのでご注意 ください

#### 6.2 廃棄(寿命)

お住まいの自治体の廃棄基準に基づいて、廃棄してください。

### 6.3 保証とアフターサービス

本製品に対する ご質問、ご意見、ご相談は カスタマーサポートまで ご連絡ください。

※お問い合わせの際は下記商品名と型番を お申し付けください。

スムーズスキン カスタマーサポート 0120-791-355

(10:00-18:00/土日祝除く)

http://www.smoothskin.com

品名:スムーズスキン bare+

SSB4J-BLK-BXS-ASI

型番 SSB4J-WHT-BXS-ASI SSB4J-NUD-BXS-ASI

#### 【保証規定】

- 保証期間内に取扱説明書及び添付の注意書き等に従い正常な状態で 使用していて故障した場合には、本規程に基づき無料交換致します。
- 2. 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。
  - (1) 本保証書のご提示がない時
  - (2) 本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、 または、文字を書き換えられたもの
  - (3) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の時
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異、戦争や 紛争などによる故障及び損傷の時
  - (5) 使用上の誤り、事故、乱用、異電圧及び不当な修理や改造による 故障及び損傷
  - (6) 注意事項を遵守しなかった原因による故障
  - (7) お客様の不注意や故意による故障
- 3. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本保証書は個人の使用についてのみ有効です。業務用に使用の場合は 本保証書の対象外です。

## 保証書

商品名	スムーズスキン bare+ ■お買上げ店(販売店·住所·TEL)■
保証期間	本 体:2 年 付属消耗部品は適用外
お買上げ日	年 月 日
	お名前
お客様	で住所 〒
	TEL

#### 愛情点検

#### 一長年ご使用の電気器具の点検を!一 で使用の際、このようなことはありませんか?



- ドを動かすと通電したり、しなかったりする。
- プラグ、コード、本体、アダプターなどが異常に執い。

●本書は、保証規定に基づき無料交換を行なうことをお約束するもの です。お買上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合は、 本書をご提示の上、当社にご連絡ください。●包装・仕様等は予告なしに 変更する場合がありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

## 一発売元一

CyDen株式会社

で使用中止: 故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセント から電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル 2階

詳しい製品の使い方などは、スムーズスキン公式サイトへ http://www.smoothskin.com

CyDen株式会社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル 2階

#### 英国製

\*実際の製品は、本取扱説明書内のイラストと異なる場合があります。

CM12-1575-01





